

TIP



Polymerizační lampa SmartLite Pro s Endoaktivátorem

NOVINKA



WWW.JANDA-DENTAL.CZ

Polymerizační lampa SmartLite Pro s Endoaktivátorem



WWW.JANDA-DENTAL.CZ

Polymerizační lampa SmartLite Pro s Endoaktivátorem



SmartLite® Pro

Polymerizační LED vytvrzovací světlo

Hroty s rychlospojkou otočné o 360 stupňů využívají sílu ergonomie a jednoduchosti, aby se přizpůsobily různým klinickým indikacím:


- **Nízkoprofilový vytvrzovací hrot** pro vynikající klinický přístup pomocí kolimovaného světelného paprsku a velké 10 mm aktivní vytvrzovací plochy.
- **Transiluminační hrot** pro diagnostiku mezizubních kazů a prasklých zubů nebo vizualizaci endodontického přístupu. Jeho sofistikovaný design zahrnuje 1 mm soustředěný světelný výstup pro optimalizaci účinnosti diagnostiky a identifikaci problémů, které nejsou viditelné pouhým okem.
- **Nástavec SmartLite Pro EndoActivator™**. SmartLite Pro EndoActivator™ je navržen pro vícesměrný pohyb a využívá eliptický pohyb a zvýšenou energii pro účinnou aktivaci zavlažovacího prostředku.

Do obchodu Z



Design ve stylu pera


Pozoruhodný design ve stylu pera, který působí vyváženě v ruce a krásně ve svých detailech.

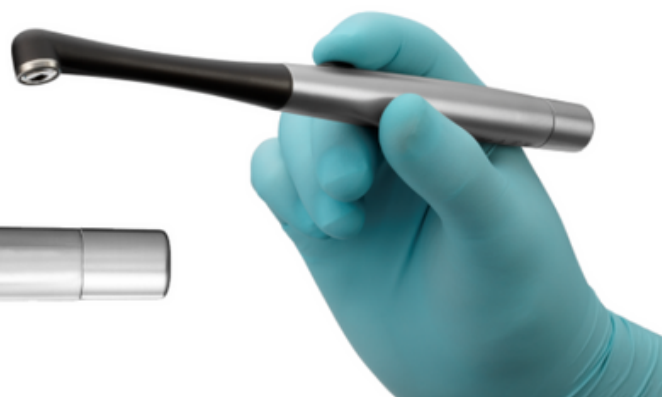

WWW.JANDA-DENTAL.CZ

Spolehlivé klinické výsledky

Velký průměr aktivního vytvrzování 10 mm pro pokrytí větších výplní v kombinaci s vynikající kolimací paprsku pro spolehlivé vytvrzení i na větší vzdálenosti.

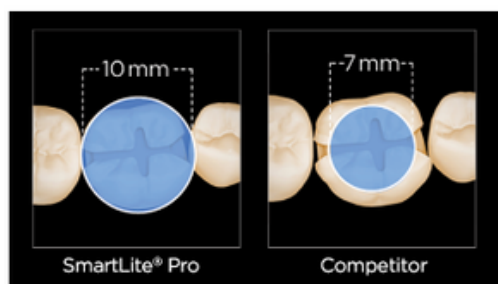


Nejmodernější optika

Optimalizovaný design 4 LED poskytuje homogenní distribuci světla po celé vytvrzované oblasti. SmartLite® Pro poskytuje průměrné ozáření 1250 mW / cm².

Profily paprsků 4 světél ukazující distribuci světla vyzařovaného po špičkách světla¹

Všechny snímky pořízené ve vzdálenosti 10 mm od špičky za stejných podmínek ukazující nefiltrované rozložení ozáření všech vlnových délek modrého a fialového světla (350-550 nm). ¹ R. Price (2019). Nepublikovaná zadaná studie, údaje v evidenci. K dispozici na vyžádání.

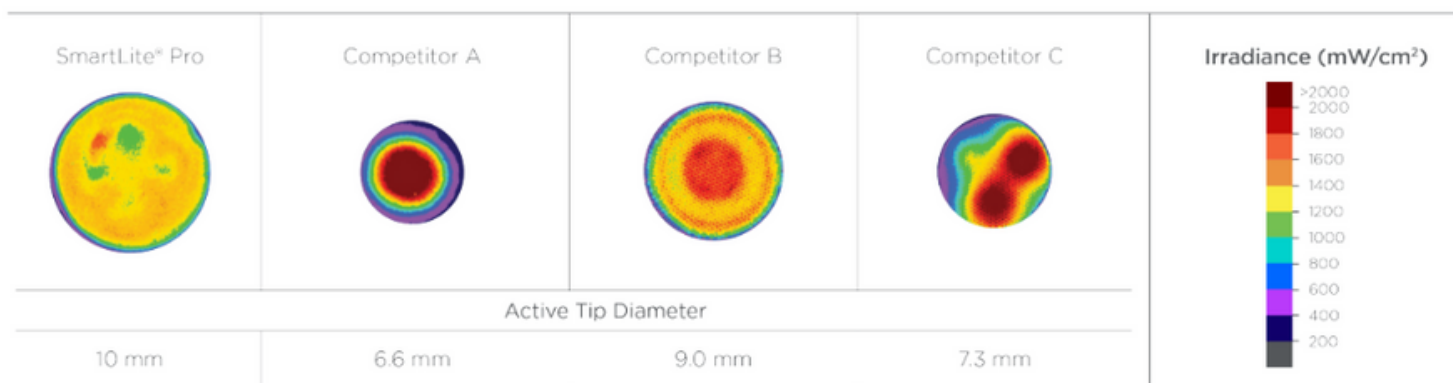

Proč si vybrat SmartLite Pro?

✓ Spolehlivé klinické výsledky

Velký průměr aktivního vytvrzování 10 mm pro pokrytí větších náhrad v kombinaci s vynikající kolimací paprsku pro spolehlivé vytvrzování i na větší vzdálenosti

✓ Větší důvěra

v endo ošetření v jedné návštěvě

✓ Nejmodernější optika

Optimalizovaný design se 4 LED diodami zajišťuje homogenní rozložení světla po celé aktivní vytvrzovací ploše

